# EST AVAILABLE COPY

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-202764

(43)Date of publication of application: 04.09.1991

(51)Int.CI.

GO1N 27/327

(21)Application number: 02-113316

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

27.04.1990

(72)Inventor:

KAWAGURI MARIKO

OTANI MAYUMI NANKAI SHIRO

YOSHIOKA TOSHIHIKO

IIJIMA TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 01245630

Priority date: 21.09.1989


Priority country: JP

### (54) BIOSENSOR AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To measure the concentration of a substrate in the specimen of an organism readily and to improve measuring accuracy by forming an enzyme reaction layer comprising the mixture of oxidoreductase, hydrophilic macromolecules and an electron acceptor on the surface of an electrode system.

CONSTITUTION: Conductive carbon paste is printed on an insulating substrate 1. The paste is heated and dried, and an electrode system comprising a counter electrode 2 and a measuring electrode 3 is formed. Then, an insulating layer 4 is formed so that parts 2' and 3' of the electrodes which are to become the electrochemically acting parts are made to remain. The aqueous solution of carboxymethylcellulose (CMC) which is one kind of hydrophilic macromolecules is applied so as to cover the surfaces of the electrode systems 2' and 3'. The mixture of oxidoreductase and an electron acceptor is dropped on the CMC, heated and dried. Thus an enzyme reaction layer 5 is formed. Glucose standard liquid as specimen liquid is dropped on the reaction layer 5 in this glucose sensor. A constant voltage is applied to the measuring electrode 3 with the counter electrode as a reference, and the current is measured. The current value corresponds to the concentration of the glucose which is a substrate.

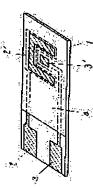

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### 90日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 願 公 開

### @公開特許公報(A)

平3-202764

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月4日

G 01 N 27/327

7235-2G

·G 01 N 27/30

353 R

7235-2G 7235-2G

3 5 3 3 5 3

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全6頁)

会発明の名称

パイオセンサおよびその製造法

创特 頤 平2-113316

願 平2(1990)4月27日 忽出

優先権主張

〒1 (1989) 9月21日 ○日本(JP) 回特願 平1-245630

真 理 子 @発 明 者 河栗 真 由 美 大 谷 個発 明 史 海 個発 明 者 眀 者 吉 圌 俊 @発 島 孝 個発 明 者 飯

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 朗 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 彦 志

大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

松下電器産業株式会社 の出 顖 人 重 孝 個代 理 人 弁理士 栗野

外1名

明

1、発明の名称

パイオセンサおよびその製造法

- 2、特許請求の範囲
- (1) 少なくとも測定極と対極からなる電極系を設 けた絶縁性の基板を備え 前記電極系の表面に酸 化還元酵素と親水性高分子および電子受容体の混 合物からなる酵素反応層を設け、 前記酸化還元醇 素と電子受容体と試料液の反応に際しての物質濃 度変化を電気化学的に前記電極系で検知し前記基 質濃度を測定するパイオセンザ。
- (2) 少なくとも測定極と対極からなる電極系を設 けた絶縁性の基板を備え 前記電極系の表面に酸・ 化還元酵素と親水性高分子および電子受容体の混 合物からなる酵素反応層を設け その上に 濾過 層を付加し 前記酸化還元酵素と電子受容体と試 料液の反応に際しての物質濃度変化を電気化学的 に前記電極系で検知し前記基質濃度を測定するバ イオセンサ
- (3) 徳過暦が親水性高分子からなることを特徴と

する請求項2記載のバイオセンサ。

- (4) 濾過層が多孔性の高分子層であることを特徴 とする請求項2記載のパイオセンサ。
- (5) 濾過層が界面括性剤を含むことを特徴とする 請求項2記載のパイオセンサ。
- (6) 少なくとも御定極と対極からなる電極系を設 けた絶縁性の基板を備え 前記電極系の表面に酸 化還元酵素と親水性高分子および電子受容体から なる酵素反応層を設け、 前記酵素と電子受容体と 試料液の反応に際しての物質濃度変化を電気化学 的に前記電極系で検知するバイオセンサにおいて 前記電極系上に親水性高分子溶液を塗布しその上 に親水性高分子と酸化還元酵素と電子受容体の混 合液を塗布 乾燥して酵素反応層を形成すること を特徴とするパイオセンサの製造法
- (7) 少なくとも測定極と対極からなる電極系を設 けた絶縁性の基板を備え、前記電極系の表面に酸 化還元酵素と親水性高分子および電子受容体から なる酵素反応圏を設け、前記酵素と電子受容体と 試料液の反応に際しての物質濃度変化を電気化学

的に前記電極系で検知するパイオセンサにおいて 前記電極系上に親水性高分子溶液を強布 乾燥し その上に親水性高分子と酸化還元酵素と電子受容 体の混合液を塗布 乾燥して酵素反応層を形成す ることを特徴とするパイオセンサの製造機

- (8) 酵素反応層を形成後さらに高分子溶液を塗布して乾燥し濾過層を形成することを特徴とする請求項 6 または 7 記載のパイオセンサの製造法
- (9) 酵素反応暦を30度から70度の雰囲気中で 形成することを特徴とする請求項6または7記載 のバイオセンサの製造法
- (10) 酵素反応層を乾燥気体中で形成することを特徴とする請求項 6 または 7 記載のバイオセンサの 製造法
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は 種々の微量の生体試料中の特定成分 について 試料液を希釈することなく迅速かつ簡 便に定量することのできるパイオセンサに関する。 従来の技術

しさらに電子受容体の層を形成しているため反応 する際 各層が溶解するのに時間を要し反応開始 が遅れるため 測定時間が短縮できないという問 題があった。

課題を解決するための手段

また 固形物を含む試料に対しては その上に 遠過層を付加するものであり、また酵素反応層については 親水性高分子溶液を塗布し さらに親水性高分子と酵素と電子受容体の混合溶液を塗布乾燥することを特徴とする

作用

本発明によれば 電極系をも含めたディスポー

発明が解決しようとする課題

実施例

以下、本発明の一実施例について説明する。 <実施例1>

バイオセンサの一例として、グルコースセンサについて説明する。第1図および第2図は、グルコースセンサの一実施例について示したもので、バイオセンサの斜視図と縦断面図である。ポリエチレンテレフタレートからなる絶縁性の基板1にスクリーン印刷により導電性カーボンペーストを印刷し、加熱乾燥することにより、対極2、測定

福るからなる電極系を形成する

次に 電極系を部分的に覆い 各々の電極の電気化学的に作用する部分となる 2 ′、 3 ′ (1 mm ²)を残すように 艳緑性ペーストを前記と同様に印刷し 加熱処理をして絶縁層 4 を形成する。にのの電極系(2 ′、 3 ′)の表面を覆うようにセルロース系の親水性高分子の一種である C M C (カルボキシメチルセルロース)の水溶液を塗布してカルボキシメチルセルロース)の水溶液を塗布しては、C M C に酸化型元酸素としてグルコースオキシダーゼ(G O D)と電子受容体であるし、40度で15分加熱乾燥して酵素反応層 5 を形成した

上記のように構成したグルコースセンサに試料 被としてグルコース標準液を酵素反応層 5 に 5 μ 「適下し」1分後に対極を基準にして測定極にア ノード方向へ+0.5 Vの定電圧を印加し5秒後の 電流を測定する。グルコース標準液によりフェリ シアン化カリウムが溶解し、グルコースが酵素反 応層において酸化される際、フェロシアン化カリ

これは加熱した場合は乾燥が速やかに行なわれるためフェリシアン化カリウムの粒子が細かい状態で均一に分布しているのに比べ 加熱しない場合は乾燥に長時間要するため フェリシアン化カリウムが大きな結晶に成長し これにより溶解速度が低下し反応速度が減少したと考えられる。

または、40度に加熱した場合のの配子では、10度に加熱した場合ののでは、10分割では、10分割では、10分割では、10分割では、10分割では、10分割のに、10分割のに、10分割のでは、10分割のは、10分

ウムに還元される。 そこで、 上記の定電圧の印加により、 生成したフェロシアン化カリウムの濃度に基づく酸化電流が得られ、 この電流低は低流をであるグルコースの濃度に対応する。 応答電流を測定したころ900mg/dlという高濃度まで良好な直線性が得られた。 従来の積層により酵素直線性を得るには、900mg/dlまで直線性を得るには、反応時間を2分必要とした。

繰し 応答速度が改善され加熱温度を 4 0 度で作製したセンサと同様の応答が得られた。これは 乾燥気体により水分の蒸発が促進されたため、フェリシアン化カリウムなどの粒径が細かい状態で 形成できたためである。

### < 実施例 2 >

実施例1と同様に電極を形成後 電極系を覆うようにCMCの0. 5%水溶液を塗布乾燥し第4 図に示すように親水性高分子層(CMC層) 6を 形成した。さらに CMC0. 5%水溶液1gに 酸化還元酵素としてグルコースオキシダーゼ(G OD) 10mgと電子受容体のフェリシアン化カ リウム 2 0 m g を 溶かした ものを 滴下 し 4 0 度で 1 0 分 乾燥して 酵素 反応 層 5 を 形成した。 実施 例 1 では C M C を 乾燥させないで G O D やフェリシアン化カリウムを 滴下しているため 酵素 反応層が C M C 層の 広がりと同様に広がった。

そのため、酵素や電子受容体の単位面積当りの担 持量を一定にするにはCMCの広がりを制御する 必要が生じたが、CMCを一旦乾燥すると同量 酵素反応暦の成分を滴下すれば、ほぼ同じ面積に 広がるため、そろった酵素反応層を形成すること が可能になった。これは、センサを大量に生産す る際メリットとなる。

さらに、エタノールの様な有機溶媒に溶解し塗布すると、酵素反応層を乱す事なく濾過層を形成でき、応答のばらつきも改善できた。 濾過層を形成式する際、酵素反応層を実施例2の製法で作製すると酵素反応層の広がりが制御されているため濾過層の広がりも制御が容易となった。

### < 実施例 4 >

実施例1と同様に酵素反応層まで形成じたセン

た。 さらに ドライエアーの導入を併用することにより、 実施例 1 と同様に乾燥時間の短縮ができた。

### < 実施例3 >

濾過層を形成する際 親水性高分子としてPV

サに濾過層としてポリスチレンの 0. 0 5 % トルエン溶液を塗布 乾燥した ポリスチレンの膜は水溶性ではないため 血液により溶解することはない。

また、 が表演とでは、 でのあるないで、 でのあるないで、 でのでは、 でのでいます。 でいます。 でいまな。 でいま

### < 実施例5 >

実施例1と同様に酵素反応層まで形成したセンサにポリスチレン1%トルエン溶液1gにSiOaを

### 特团平3-202764(5)

10mg混合した液を滴下し乾燥させて濾過層を 形成した。血液を供給すると、ポリスチレンは溶 けないが、SiO\*が混在して隙間ができているため、 血漿成分が濾過されて酵素反応層に到達した。Si O\*のかわりにA1\*O\*をもちいても同様な濾過層が形 成できた。実施例4のように多孔性の薄層にする と速やかに血球が濾過できるが層が薄いため壊れ 易い欠点があるが、厚膜にしSiO\*等の微粒子を加 えることで濾過のスピードを低下することなく壊れにくいセンサを形成することができた。

### < 実施例 6 >

子受容体として 上記実施例に用いたフェリシアン化カリウムが安定に反応するので適しているが Pーベンソキノンを使えば 反応速度が大きので高速化に適している。また 2・6 ージクロロフェナジンメトサルフェート ターナフトキリウム フェロセン等が使用できる

### 発明の効果

なお、本発明のバイオセンサは上記実施例に示したグルコースセンサに限らず、アルコニルを受け、アルコニアロールセンサなど、酸化湿元酵素として実施例ではグルコースオキシダーゼを用いたが、他の酵素、たとえばアルコールオキシダーゼ、コレステロールオキシダーゼ、キサンオキシダーゼ、等を用いることができる。また、電

ており、 反応速度が向上 製造工程が簡略化できる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例のバイオセンサの斜視図 第2図、第4図、第5図および第6図は同パイオセンサの縦断面図 第3図はバイオセンサの応答特性図 第7図は従来例のバイオセンサの縦断面図である。

1・基板 2・対極 3・測定極 4・絶縁 巻5・酵素反応圏 6・親水性高分子圏 7・濾過圏 8・カバー、9・酵素圏 10・電子受容体


代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

## 特周平3-202764 (6)


第1図

/ ··· 基 极 2 ··· 対 夜 3 ··· 訓 定 極 4 ··· 絶 暴 眉 5 ··· 鹏 素 反 応 層


第 5 図

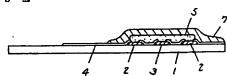


2 3 4 3' 8K 6 🖾

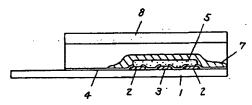


第 2 図

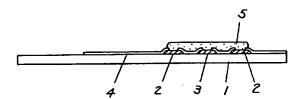

第 7 図

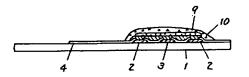

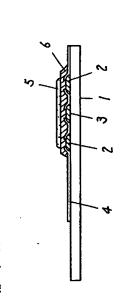

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox